



COLPOSCOPE MK-200

KOLPOSKOP MK 200


Kolposkop 5 powiększeń optycznych z kamerą HD i programem do archiwizacji w języku polskim oraz gwarancją 3 lata

Dane techniczno-użytkowe zestawu Kolposkopowego MK-200

- Odległość robocza mm 250;
- Powiększenie, współczynnik 3,2 x 5,1 x 8,2 x 13,1 x 20,7x
- Rozdzielczość l / mm 32, 50, 70, 85, 90
- Pole widzenia 63,4; 40,2; 25,1; 15,7; 9,9;
- Dioptrii dopasowanie okularów, dioptrii, nie mniej niż +5 /-5
- Zakres zmian źrenic odległości, mm 56 – 74;
- Zakres dostosowania natężenia oświetlenia na płaszczyźnie obiektu, lux 15 000 - 60 000;
- ręczny przycisk robienie zdjęć poniżej lunetek okulara w wygodnym – ergonomicznym miejscu;

Składowe zestawu Kolposkopowego Scanner MK-200

- Kolposkop Optyczny MK-200;
- Podzielnik obrazu z kamerą do kolposkopu MK-200;
- Przejedna podstawa;
- Program do archiwizacji w języku polskim ;
- Kolposkop w wersji z półką

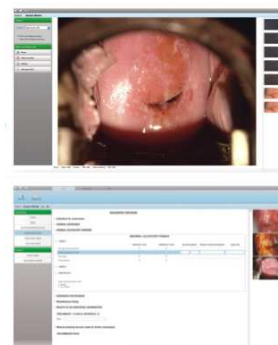

Bezpłatny program do archiwizacji w języku Polskim



Najważniejsze cechy programu :

- łatwy i intuicyjny (opanowanie pracy na programie zajmuje od 10 do 20 minut);
- bezpłatna – bezterminowa licencja;
- baza danych Pacjenta;
- możliwość archiwizacji zdjęć i nagrywania sekwencji video w programie ;
- zapisywanie zdjęć w programie lub zapisywanie poza programem (np. na dysku sieciowym, przenośnym czy lokalizacji na komputerze poza programem;
- protokół kolposkopii na zasadzie „zaznaczania – ptaszkowania ” gotowych odpowiedzi i podsumowania zaznaczonych „gotowych sentencji”.
- dużo miejsca na przyklejanie własnych adnotacji i wyników badań oraz zaleceń;
- proste narzędzie graficzne do edycji zdjęć na potrzeby raportu, do pracy naukowej czy na własne potrzeby dokumentacji medycznej;
- nagłówek z adresem placówki – lekarza na protokole z kolposkopii ,
- możliwość nadpisywania raportów dla powtórnych badań bez konieczności wypełniania ich od początku;
- brak licencji stanowiskowej oraz rocznych opłat za używanie programu .
- możliwość instalacji programu na większej niż jedna stacji roboczej;
- dobra opinia użytkowników z uwagi na łatwość obsługi i funkcjonalność;

Badanie	
Kamera	
Galeria	
Specjalny protokół wizyty	
Protokół z kolposkopii	
Raport z waginioskopii	
Raport z wulwoskopii	
Protokół	
Utwórz raport	
Harmonogram wizyt	

☐ Wykryto zmiany wrażliwe na jaskrocie
☐ Torzele Nabotha
☐ Obszary krytyczne (gruczoła)
☒ Ekstropia doczesnowa w ciąży

NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI KOLPOSKOPII

~ STOPIEN 1	Wstaw stręfę T	Zewnętrzna stręfa T	Pozycja wg wskaźników zegara	Liczba kwadrantów szczył	Nasilenie zmian
Cienki zbieżły nabłonek	☒	☐			
Nieregularna granica geograficzna	☒	☐			
Delikatna mozaika	☐	☐			
Delikatna punktacja	☒	☐			

~ STOPIEN 2	Wstaw stręfę T	Zewnętrzna stręfa T	Pozycja wg wskaźników zegara	Liczba kwadrantów szczył	Nasilenie zmian
Gęsty zbieżły nabłonek	☐	☐			
☐ Szybkie pojawianie się zbieżenia					
Wyvinęte otwory krytyczne (gruczołowe)	☒	☐			
Mozaika gruboziarnista	☐	☒			
Gubocznisto nakrapiane	☐	☒			
☐ Czysta granica					
☐ Wewnętrzny znak granicy					
☐ Znak grzbietowy					

~ NIESPECYFICZNA

MPN GENTRUM MPNOCZNE Sprężystyżym Gabinetu i Chirurgii

Wykła Nr 18 od 15.10.2022 17:01

Data wykonania:

IMIE:
PESEL:

PROTOKÓŁ KOLPOSKOPII

Wykazania do badania: zmiany cytologiczne, LSIL.

Widoczność miejsca połączenia nabłonka płaskiego i walcowatego w pełni widoczna.

WYKAZAŁ: LILIMLN I ILOCIY KOLPOSKOPII

Leżącą mozaiką na dołach stręły "1", 11 pozycja w sąsiedztwie zębca. Usiłanie paskikowanie (w dołach stręły "1" 5 pozycja w sąsiedztwie zębca). Amnionia płukim i (ogin (pozi Schlim): 4)






RAPORT Z KOLPOSKOPII: Nieprawidłowe zmiany kolposkopii. Stupień 1

DIAGNOSTYKA WSTĘPNA/KLINICZNA: LSIL (CIN I).

Zmiana pobrana: pęchła materiom do dalszych badań

Biopsja czynniki: zmiany

Lekarz: _____
Admistrat: _____